

MADE IN ITALY



APG

• • • TECH



La Belleza en buenas manos.

ALFAPARF
GROUP

SHAPINPULSE

LASER LIPOSOLUTION

PARA TU CUERPO, LA FORMA QUE ESTABAS
BUSCANDO. EN SOLO 30 MINUTOS.



¿Y SI SOLO
HICIERAN FALTA



30 MINUTOS

PARA
REMODELAR
TU CUERPO?



SHAPINPULSE

LASER LIPOSOLUTION

LÁSER de diodo 1060 nm
con emisión pulsada.



La liposolución estética para
remodelar el cuerpo en
solo **30 minutos**.

El tratamiento con acción intensa,
pero delicada sobre la piel,
para redefinir las formas del cuerpo.



Acción selectiva para contrarrestar
las acumulaciones adiposas
localizadas y difusas en
**abdomen, caderas, glúteos,
muslos y brazos.**

INDICADO PARA HOMBRES Y MUJERES.

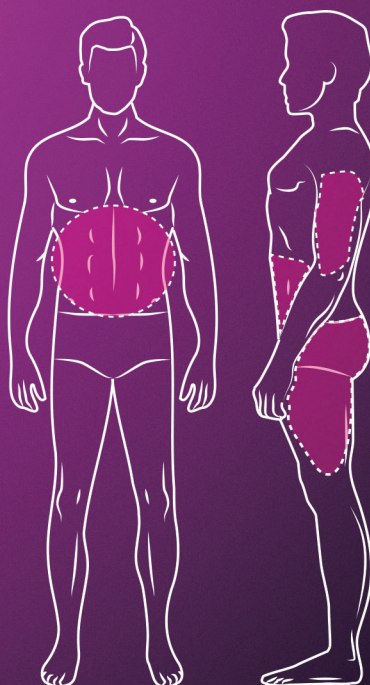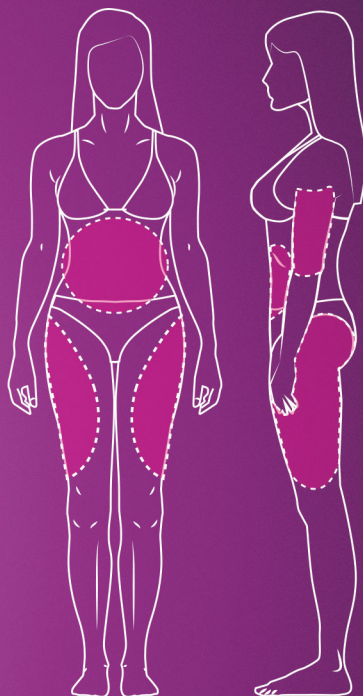


APG
TECH

PROTOSCOLOS DE TRATAMIENTO


1 única sesión para alteraciones estéticas presentes de forma moderada

2 sesiones para alteraciones estéticas presentes de forma significativa

MECANISMO DE ACCIÓN

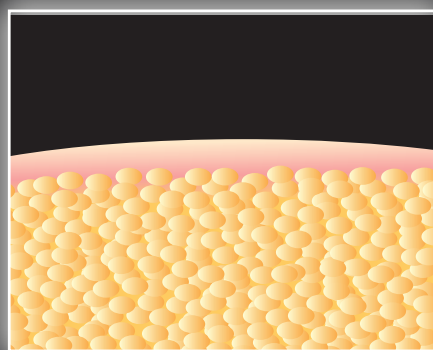



1. Panículo adiposo previo al tratamiento.

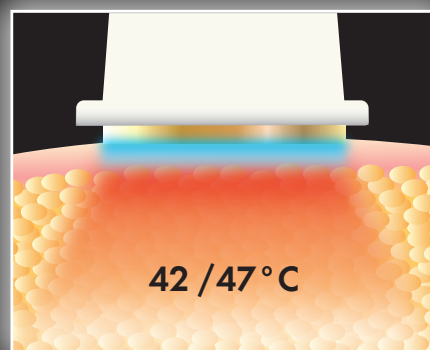

2. El láser genera calor a una temperatura en profundidad entre los 42 y los 47 °C, en relación a la composición del panículo adiposo.

RESULTADOS

LOS RESULTADOS DE CADA TRATAMIENTO **AUMENTAN CON EL PASO DE LOS DÍAS**, ALCANZANDO SU MÁXIMO ESPLENDOR DESPUÉS DE 4 SEMANAS DE LA SESIÓN.

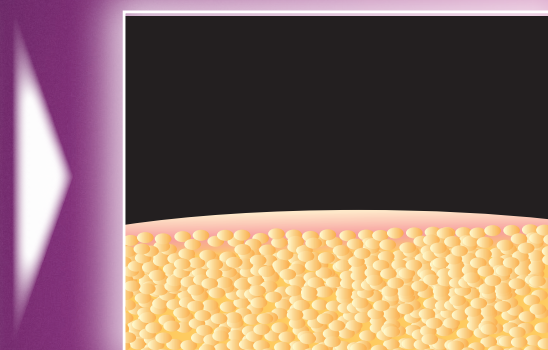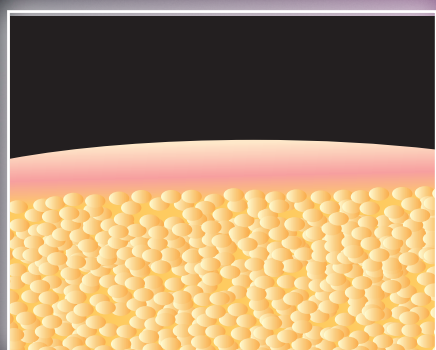

3. El incremento localizado de la temperatura aumenta la permeabilidad de los adipocitos con la consiguiente reducción significativa del pániculo adiposo cuatro semanas después del tratamiento.

PANTALLA

Amplia pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas. Fácil, intuitiva y de comprensión inmediata.

AUTOAPRENDIZAJE: permite visualizar los esquemas de aplicación de los manípulos.



MANÍPULOS

TAMAÑO 8 x 4 cm: superficie plana para tratar 32cm²

MÁXIMO CONFORT: a pesar de las elevadas temperaturas que se producen en los adipocitos, el manípulo refrigerado garantiza el máximo confort sobre la piel del cliente, gracias a los sensores que permiten la lectura constante de la temperatura subcutánea.

MÁXIMA SEGURIDAD: gracias al sistema inteligente de control de contacto que interrumpe la emisión láser si los sensores no se adhieren a la piel.

TRATAMIENTO PERSONALIZADO: el tratamiento se personaliza según las zonas que deben tratarse gracias a la posibilidad de gestionar y regular los manípulos de forma independiente.





APP ESPECÍFICA

Una aplicación específica para visualizar y comparar los resultados obtenidos por los propios clientes.

Permite:

- Visualizar la ficha de los datos personales del cliente.
- Realizar una comparación fotográfica de los resultados obtenidos.

Compatible con Android e iOS.



SHAPINPULSE

LASER LIPOSOLUTION



APLICACIÓN

Principales ejemplos de aplicación de los manípulos:



ABDOMEN Y CADERAS

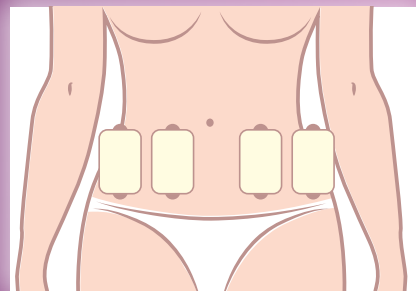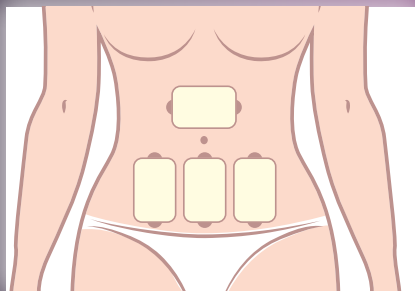

MUSLOS

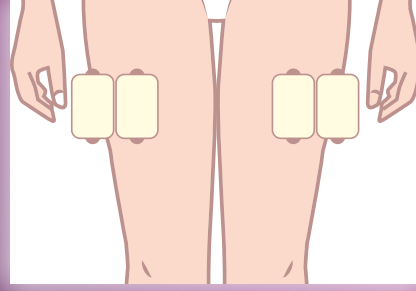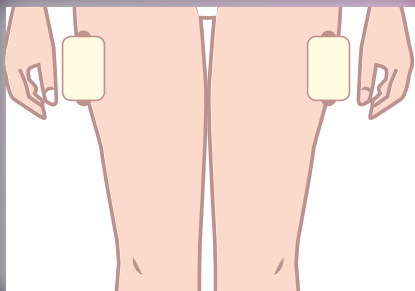

GLÚTEOS Y BRAZOS

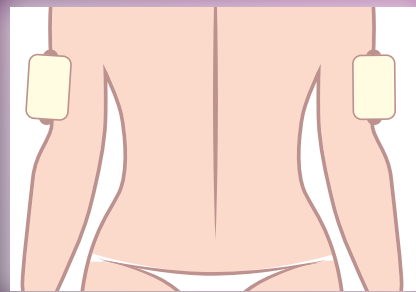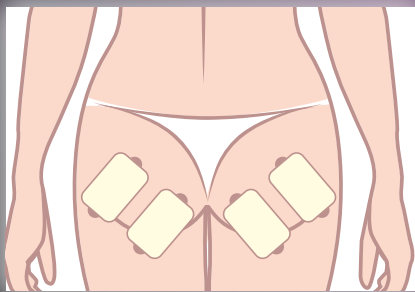

VENTAJAS

- ✓ Solo 30 minutos de tratamiento
- ✓ Programas de tratamiento reducidos:
1 o al máximo 2 sesiones
- ✓ Seguridad y confort
- ✓ No requiere la presencia del operador durante el tratamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONGITUD DE ONDA	Diodo 1060 nm
MODALIDA DE TRABAJO	Pulsada
INTERFAZ OPERATIVA	Pantalla táctil LCD a color de 10,4"
TAMAÑO DE CADA MANÍPULO	4 x 8 = 32 cm ²
POTENCIA DE SALIDA	50 W por manípulo, regulable de 0,9 a 1.5 W/cm ²
ENFRIAMIENTO	Ciclo de enfriamiento interno con agua y sistema chiller + enfriamiento de los manípulos con células de Peltier
CLASE DE LÁSER	4
TAMAÑO	50 x 85 x 190 cm
PESO	80 kg

MADE IN ITALY



APG

• • • TECH



La Belleza en buenas manos.

BEAUTY & BUSINESS S.p.A
Via C. Cantù, 1
20123 Milano (Italy)

www.apgtech.eu

ALFAPARF
GROUP

PF023023



8 022297 1103945